



CAVALLO s.r.l.

via Mulino 5/B

20090 BUCCINASCO (MI)

T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234

e-mail:info@cavallocom.it www.cavallocom.it



INCUBATORE REFRIGERATO 700FTX-L con luci



caratteristiche tecniche:

Campo di temperatura da +5°C a +50°C

Temperatura di utilizzo: da +5°C a +30°C

Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304

Fondo con angoli arrotondati per una semplice pulizia

Isolamento con poliuretano ad alta densità spessore 60 mm.

Porta frontale ad anta cieca completa di guarnizione magnetica in silicone

Blocco apertura porta a 90° - con molle di ritorno.

Maniglia di apertura porta integrata nella porta stessa.

Resistenza anticondensa sul profilo della porta

Raffreddamento, collocato nella parte superiore della cella,

mediante impianto frigorifero, C.F.C. Free ad aria

Ventilazione interna per uniformare la temperatura

Riscaldamento a mezzo resistenza alettata-corazzata.


Vaschetta raccogli condensa posta sulla schiena della macchina completa di resistenza di riscaldamento per l'evaporazione dell'acqua di condensa.

Luce di servizio

Impianto di illuminazione a mezzo n. 4 lampade al neon da 36W

posizionate sulla schiena e azionate direttamente dal

Programmatore di Temperatura mod. WEST 6400

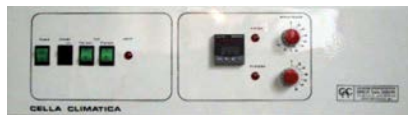

Quadro comandi con
Programmatore West 6400

Quadro di comando, posto frontalmente nella parte superiore della cella, portante:

- Programmatore di temperatura mod. WEST 6400 con controllo PID autotuning
- Termostati di sicurezza minima e massima temperatura con allarme visivo
- Interruttore generale
- Interruttore/selezionatore luci
- Fusibili

Mod. 700FTX-L con Luci

Capacità netta lt. 480

Dim. interne: mm. 600 x 650 x 1225H

Dim. esterne: mm. 700 x 840 x 2070H

n.5 Ripiani interni grigliati regolabili in altezza

Kit di n.4 Ruote girevoli rinforzate

V. 380/3 N+T - Impianto Elettrico A Norme CEI 62-25 MARCATURA CE

Made in Italy

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.